




# **AcryRock**

*We take care of your smile*



DENTI ARTIFICIALI IN RESINA - ACRYLIC TEETH

 Ruthinium®  
Group

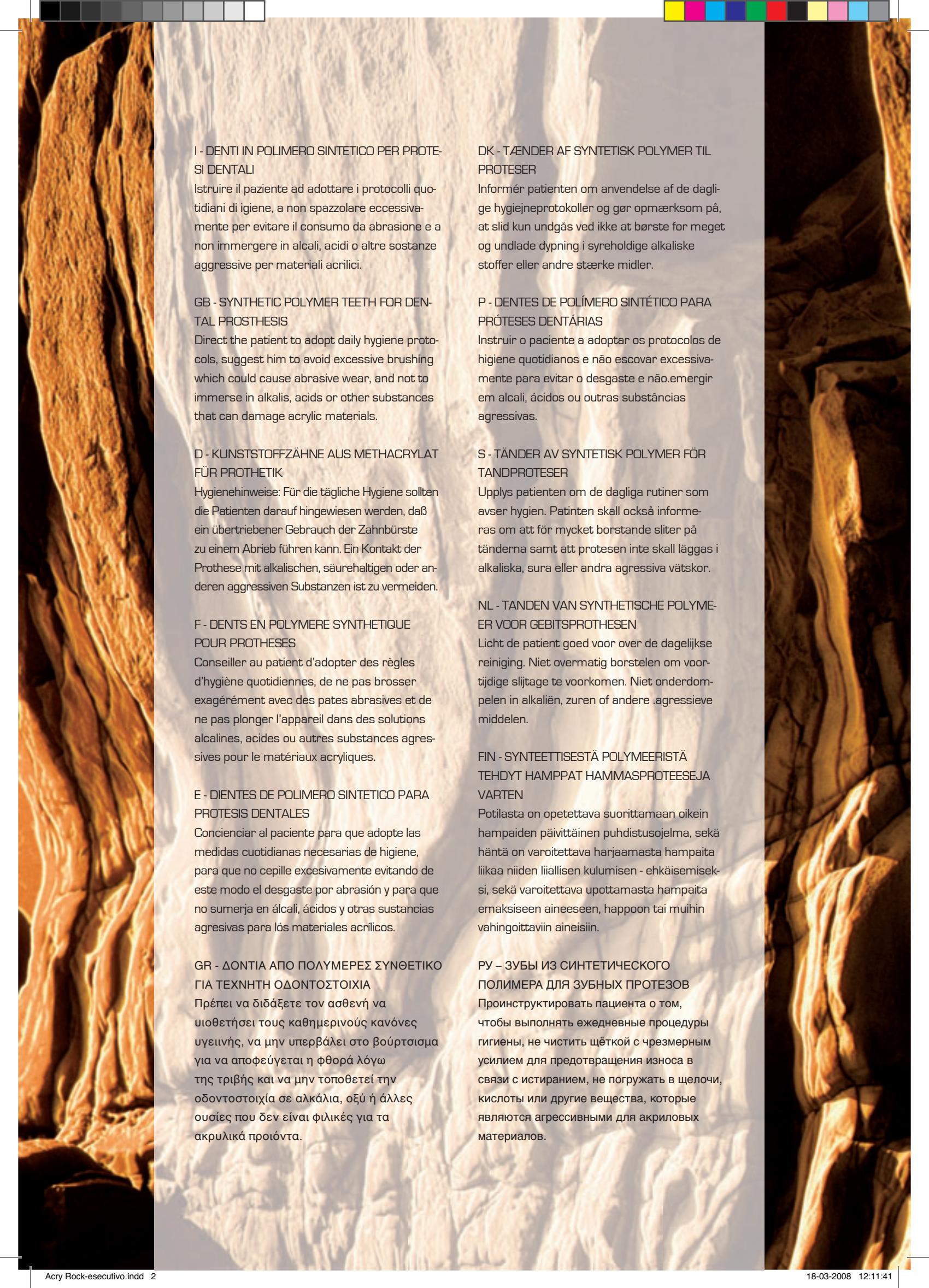

#### I - DENTI IN POLIMERO SINTETICO PER PROTESI DENTALI

Istruire il paziente ad adottare i protocolli quotidiani di igiene, a non spazzolare eccessivamente per evitare il consumo da abrasione e a non immergere in alcali, acidi o altre sostanze aggressive per materiali acrilici.

#### GB - SYNTHETIC POLYMER TEETH FOR DENTAL PROSTHESIS

Direct the patient to adopt daily hygiene protocols, suggest him to avoid excessive brushing which could cause abrasive wear, and not to immerse in alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials.

#### D - KUNSTSTOFFZÄHNE AUS METHACRYLAT FÜR PROTHETIK

Hygienehinweise: Für die tägliche Hygiene sollten die Patienten darauf hingewiesen werden, daß ein übertriebener Gebrauch der Zahnbürste zu einem Abrieb führen kann. Ein Kontakt der Prothese mit alkalischen, säurehaltigen oder anderen aggressiven Substanzen ist zu vermeiden.

#### F - DENTS EN POLYMÈRE SYNTHÉTIQUE POUR PROTHÈSES

Conseiller au patient d'adopter des règles d'hygiène quotidiennes, de ne pas brosser exagérément avec des pates abrasives et de ne pas plonger l'appareil dans des solutions alcalines, acides ou autres substances agressives pour le matériaux acryliques.

#### E - DIENTES DE POLIMERO SINTETICO PARA PROTESIS DENTALES

Concienciar al paciente para que adopte las medidas cotidianas necesarias de higiene, para que no cepille excesivamente evitando de este modo el desgaste por abrasión y para que no sumerja en álcali, ácidos y otras sustancias agresivas para los materiales acrílicos.

#### GR - ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ

Πρέπει να διδάξετε τον ασθενή να υιοθετήσει τους καθημερινούς κανόνες υγειανής, να μην υπερβάλει στο βούρτσισμα για να αποφεύγεται η φθορά λόγω της τριβής και να μην τοποθετεί την οδοντοστοιχία σε αλκάλια, οξύ ή άλλες ουσίες που δεν είναι φιλικές για τα ακρυλικά προϊόντα.

#### DK - TÆNDER AF SYNTETISK POLYMER TIL PROTESER

Informér patienten om anvendelse af de daglige hygiejneprotokoller og gør opmærksom på, at slid kun undgås ved ikke at børste for meget og undlade dyppning i syreholdige alkaliske stoffer eller andre stærke midler.

#### P - DENTES DE POLÍMERO SINTÉTICO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS

Instruir o paciente a adoptar os protocolos de higiene quotidianos e não escovar excessivamente para evitar o desgaste e não emergir em alcali, ácidos ou outras substâncias agressivas.

#### S - TÄNDER AV SYNTETISK POLYMER FÖR TANDPROTESER

Upplys patienten om de dagliga rutiner som avser hygien. Patinten skall också informeras om att för mycket borstande sliter på tänderna samt att protesen inte skall läggas i alkaliska, sura eller andra aggressiva vätskor.

#### NL - TANDEN VAN SYNTHETISCHE POLYMER VOOR GEBITSPROTHESEN

Licht de patient goed voor over de dagelijkse reiniging. Niet overmatig borstelen om voorbijde slijtage te voorkomen. Niet onderdompelen in alkaliën, zuren of andere agressieve middelen.

#### FIN - SYNTEETTISESTÄ POLYMEERISTÄ TEHDYT HAMPPAT HAMMASPROTEESEJA VARTEN

Potilasta on opettettava suorittamaan oikein hampaiden päivittäinen puhdistusohjelma, sekä häntä on varoitettava harjaamasta hampaita liikaa niiden liiallisen kulumisen - ehkäisemiseksi, sekä varoitettava upottamasta hampaita emaksiseen aineeseen, happoon tai muihin vahingoittaviin aineisiin.

#### РУ – ЗУБЫ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Проинструктируйте пациента о том, чтобы выполнять ежедневные процедуры гигиены, не чистить щёткой с чрезмерным усилием для предотвращения износа в связи с истиранием, не погружать в щелочи, кислоты или другие вещества, которые являются агрессивными для акриловых материалов.



## INCISIVI / INCISORS




### Scelta dei gruppi incisivi

Determinazione della larghezza del gruppo anteriore secondo la ricerca di Lee,


### Selecting the incisor groups

Establishing the width of the front group according to Lee's research.

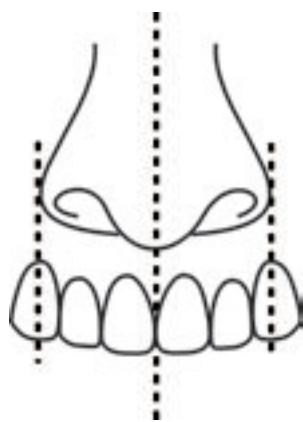

La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.

The imaginary vertical line that touches the margins of the pinna passes through the axis of the canines.

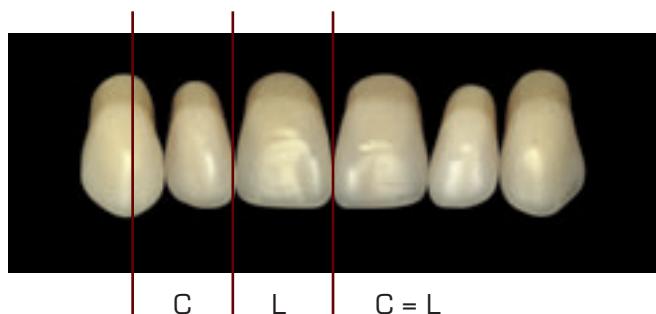


La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

The central width is given by the lateral added to the mesial part of the canine.

**Determinazione della forma secondo Williams:**  
forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.

**Establishing the shape according to Williams:**  
the shape of the teeth is chosen according to the shape of the face.

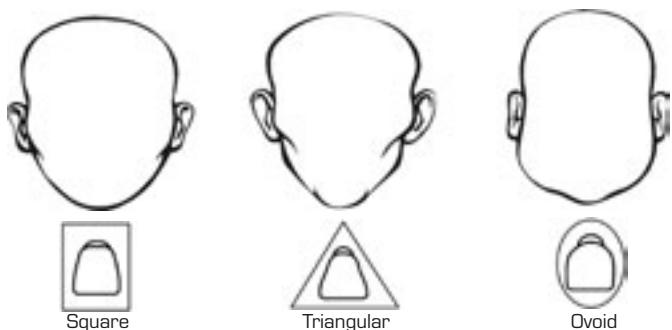

**Secondo Gerber:** la forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso.

**According to Gerber:** the shape and position of the front teeth is established by the basal line of the nose.



### Secondo la forma delle creste alveolari:

se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.

### According to the shape of the alveolar crest:

If no references are provided according to the previous classifications, the shape of the upper alveolar crest can provide information as to the shape of teeth to be used.





## MOLARI MOLARS




**Anatomici:** Molari caratterizzati da anatomia accentuata per garantire modificabilità per l'impiego in tutte le tecniche di montaggio. Angolo delle cuspidi: 25°-33°.

**Anatomic:** molars characterised by accentuated anatomy to guarantee modifiability for use in all assembly techniques.  
Cusp angle: 25°-33°.


**Geometrici:** Denti costruiti in base alle ricerche di Strack per la costruzione della protesi bilanciata bilaterale. Angolo cuspale di 20°.

**Geometric:** teeth constructed according to Strack's research for constructing bilateral balanced dentures.  
Cusp angle: 20°.

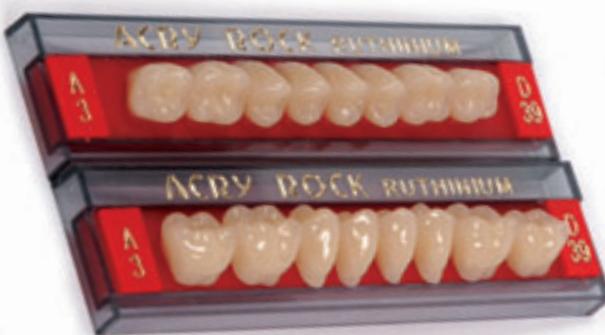

---

### Tecnologia e ricerca sui materiali al servizio della qualità Technology and research into materials to improve quality

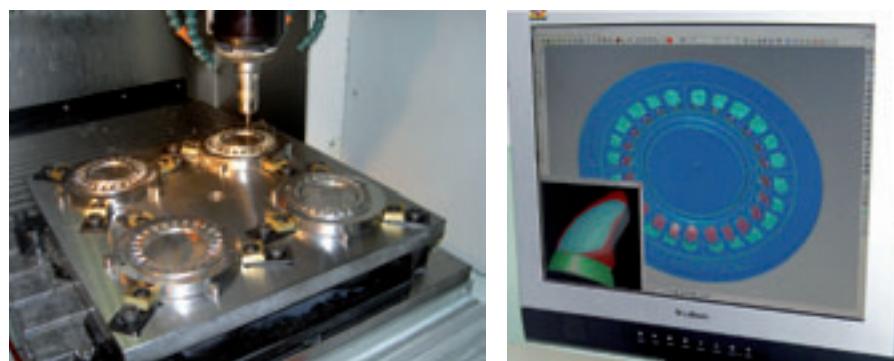

La base della qualità è l'impiego delle più avanzate tecnologie CAD/CAM  
Quality is given by using the latest CAD/CAM technology



Visione 3D dentina  
3D view dentin



Visione 3D smalto  
3D view enamel



Sezione 3D stratificazione  
3D section of stratification



**Resine ad alto peso moleolare H.M.W. (PMMA Cross-Linked)**  
**High molecular weight resin H.M.W. (PMMA Cross-Linked)**



L'utilizzo di polimeri ad alto peso molecolare modificati, combinati con particolari leganti molecolari (Cross Linking), conferisce:

- **durezza elevata**
- **eccellente resistenza all'abrasione**
- **stabilità del colore**
- **ottima resistenza all'adesione di placa**

*The use of high molecular weight modified polymers combined with special molecular linkers (Cross Linking) gives:*

- **Exceptional hardness**
- **Excellent abrasion resistance**
- **Stable colour**
- **Excellent resistance to plaque**

Molecole di PMMA  
PMMA molecule

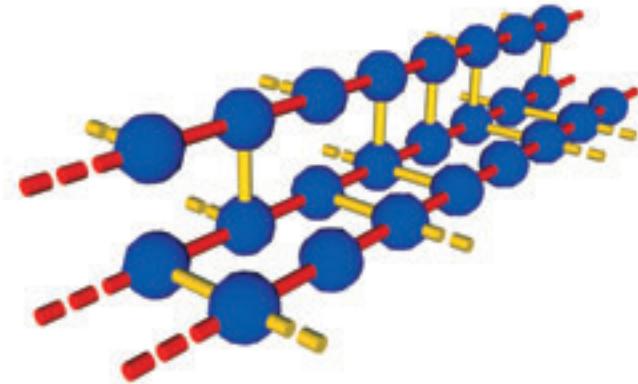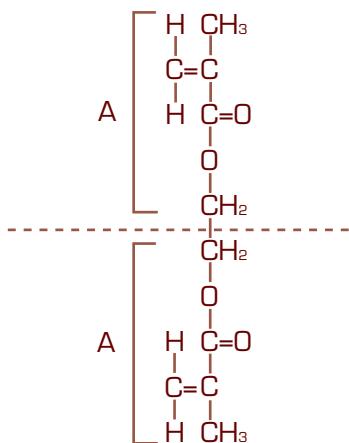


■ Legame Cross Linked tra catene molecolari  
Cross-linked bond between molecular chains

■ Legame polimerico tra monomeri  
Polymer bond between monomers

● Unità di monomero  
Monomer unit

**Colorazioni Shades**

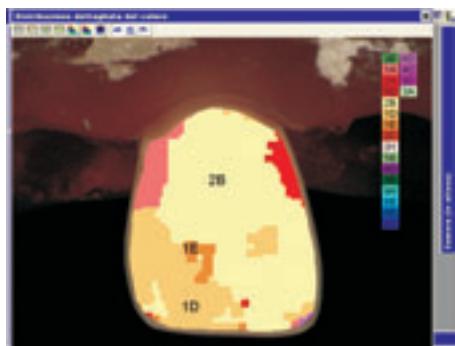

I denti artificiali Ruthinium sono disponibili in un'ampia gamma di colori. L'impiego di spettrofotometri nella fase di controllo, ne garantisce la costanza e la fedeltà.

*Ruthinium artificial teeth are available in a wide range of shades. The use of spectrophotometers during the control phase guarantees constant true colours.*




La fluorescenza è una particolare forma di luminescenza presente in alcune sostanze. Questa caratteristica è presente nei denti naturali che, quando colpiti da radiazioni ultraviolette prossime al visibile, emettono una luce di colore bianco-azzurro. In tutti i denti Ruthinium tale caratteristica è presente, per conferire un effetto ancora più naturale.

*Fluorescence is a form of luminescence that is found in certain substances. It is a feature that is found in natural teeth which, when struck by ultraviolet rays, give off a white-bluish light. This feature is found in all Ruthinium teeth to give them an even more natural look.*



# AcryRock

We take care of your smile

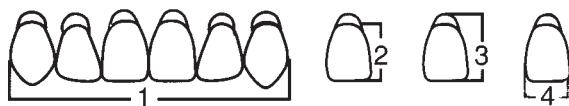

**Scala Colori - Shade Guide**

	Acry Rock	Acry Rock V
WHITE	A/1	A 1
PINK	B/1 C/1 D/1	A 2 A 3 A 3,5 A 4
YELLOW	E/1 F/1 F/2 G/1	B 1 B 2 B 3 B 4 C 1 C 2
BROWN	H/1 L/1	C 3 C 4
GREY	N/1 N/2 N/3	D 2 D 3 D 4



**DENTI ARTIFICIALI IN RESINA - ACRYLIC TEETH**



**AcryRock**  
We take care of your smile



	<b>S51</b>	(1) 39,7 (2) 7,7 (3) 10,0 (4) 7,2	
	<b>S52</b>	(1) 41,9 (2) 9,4 (3) 11,2 (4) 7,4	
	<b>S53</b>	(1) 43,7 (2) 9,7 (3) 11,8 (4) 8,3	
	<b>S54</b>	(1) 45,8 (2) 9,3 (3) 12,0 (4) 8,3	
	<b>S55</b>	(1) 44,7 (2) 13,1 (3) 12,4 (4) 8,0	
	<b>S56</b>	(1) 47,0 (2) 10,0 (3) 12,2 (4) 8,1	
	<b>S60</b>	(1) 39,6 (2) 8,8 (3) 10,6 (4) 6,8	
	<b>S61</b>	(1) 39,6 (2) 8,9 (3) 10,8 (4) 7,3	
	<b>S62</b>	(1) 40,0 (2) 8,9 (3) 10,9 (4) 7,3	
	<b>S63</b>	(1) 43,4 (2) 9,7 (3) 11,7 (4) 7,9	
	<b>S64</b>	(1) 41,5 (2) 9,3 (3) 11,8 (4) 7,5	

**Tabella di Articolazione**  
**Articulation table**

S 13	I 13	D 35
S 14	I 13	D 35
S 15	I 38	D 37 - D 43
S 17	I 41	D 39 - D 44
S 18	I 18	D 39 - D 44
S 25	I 18	D 39
S 26	I 46	D 39 - D 45
S 32	I 41 - I 42	D 39 - D 44
S 33	I 46	D 45
S 37	I 37	D 36 - D 42
S 38	I 38	D 37 - D 43
S 39	I 51	D 35
S 40	I 40	D 36 - D 42
S 41	I 41	D 39 - D 44
S 42	I 42	D 39 - D 44
S 47	I 18 - I 53	D 39
S 48	I 46	D 45
S 51	I 51	D 35
S 52	I 52	D 36 - D 42
S 53	I 53	D 39 - D 44
S 54	I 53	D 39 - D 44
S 55	I 66	D 45 - D 46
S 56	I 46	D 45
S 60	I 60	D 33
S 61	I 61	D 36 - D 42
S 62	I 61	D 36 - D 42
S 63	I 63	D 39 - D 44
S 64	I 64	D 41
S 65	I 65	D 41
S 66	I 66	D 44
S 67	I 67	D 45
S 68	I 68	D 46

	<b>S65</b>	(1) 43,4 (2) 10,0 (3) 13,0 (4) 7,7	
	<b>S66</b>	(1) 49,0 (2) 11,7 (3) 13,9 (4) 9,0	
	<b>S67</b>	(1) 50,4 (2) 10,3 (3) 12,2 (4) 9,2	
	<b>S68</b>	(1) 52,8 (2) 12,5 (3) 15,2 (4) 9,7	

DENTI ARTIFICIALI IN RESINA - ACRYLIC TEETH



**AcryRock**  
We take care of your smile

<b>I13</b>	(1) 33,3 (2) 7,4 (3) 9,2 (4) 5,0	
<b>I18</b>	(1) 36,3 (2) 8,6 (3) 10,4 (4) 5,3	
<b>I37</b>	(1) 32,2 (2) 7,1 (3) 8,6 (4) 4,7	
<b>I38</b>	(1) 31,7 (2) 8,0 (3) 10,0 (4) 4,7	
<b>I40</b>	(1) 31,5 (2) 9,2 (3) 11,0 (4) 4,7	
<b>I41</b>	(1) 34,2 (2) 8,5 (3) 10,2 (4) 5,0	
<b>I42</b>	(1) 35,0 (2) 8,2 (3) 9,9 (4) 5,4	
<b>I46</b>	(1) 35,1 (2) 10,2 (3) 10,4 (4) 5,0	
<b>I51</b>	(1) 31,2 (2) 7,3 (3) 9,3 (4) 5,5	
<b>I52</b>	(1) 32,7 (2) 8,4 (3) 10,2 (4) 4,9	
<b>I53</b>	(1) 34,1 (2) 8,7 (3) 11,3 (4) 5,2	

Codice Prodotto Product Code	
0010001	ACRY ROCK 6 UPPER
0010002	ACRY ROCK 6 LOWER
0010003	ACRY ROCK 8 UPPER
0010004	ACRY ROCK 8 LOWER
0020001	ACRY ROCK SET 28
0020002	LIVE MOULD CHART ACRY ROCK
0030001	SHADE GUIDE ACRY ROCK
0010013	ACRY ROCK V. 6 UPPER
0010014	ACRY ROCK V. 6 LOWER
0010015	ACRY ROCK V. 8 UPPER
0010016	ACRY ROCK V. 8 LOWER
0020004	LIVE MOULD CHART ACRY ROCK V.
0030002	SHADE GUIDE ACRY ROCK V.

<b>I60</b>	(1) 30,7 (2) 8,0 (3) 9,8 (4) 4,5	
<b>I61</b>	(1) 30,7 (2) 8,3 (3) 10,0 (4) 4,6	
<b>I63</b>	(1) 34,8 (2) 9,4 (3) 11,0 (4) 4,9	
<b>I64</b>	(1) 31,5 (2) 8,7 (3) 10,5 (4) 4,6	
<b>I65</b>	(1) 34,7 (2) 10,1 (3) 12,2 (4) 5,0	
<b>I66</b>	(1) 35,5 (2) 10,4 (3) 12,8 (4) 5,1	
<b>I67</b>	(1) 40,7 (2) 10,3 (3) 12,7 (4) 5,7	
<b>I68</b>	(1) 39,2 (2) 11,2 (3) 13,4 (4) 5,7	

DENTI ARTIFICIALI IN RESINA - ACRYLIC TEETH




# AcryRock

We take care of your smile

Acry Rock comply with ISO 22112:2005 - Type 1 - Type 2

D33 [1] 26,9 [2] 30,5 [3] 7,2 [4] 8,1

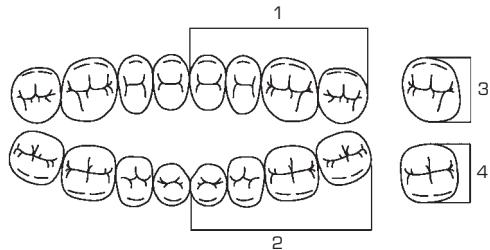

**A:** Anatomico - *Anatomic*  
**G:** Geometrico - *Geometric*

D35 [1] 30,7 [2] 33,0 [3] 8,5 [4] 5,5



D42 [1] 28,7 [2] 30,6 [3] 8,2 [4] 7,8



D36 [1] 28,8 [2] 31,1 [3] 8,2 [4] 8,6



D43 [1] 29,6 [2] 31,4 [3] 8,3 [4] 8,1



D37 [1] 30,7 [2] 33,2 [3] 8,4 [4] 8,8



D44 [1] 31,1 [2] 33,0 [3] 8,5 [4] 8,6




D39 [1] 30,1 [2] 35,0 [3] 8,5 [4] 8,5



D45 [1] 31,0 [2] 33,3 [3] 8,8 [4] 8,6



D41 [1] 30,0 [2] 33,5 [3] 8,6 [4] 8,9

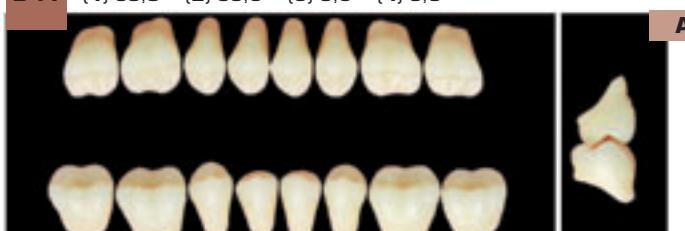

D46 [1] 33,6 [2] 35,6 [3] 9,6 [4] 9,2



DENTI ARTIFICIALI IN RESINA - ACRYLIC TEETH



Dental Manufacturing S.p.A.  
Via Ca' Mignola Nuova, 1699  
45021 Badia Polesine (RO) - Italy  
Tel. +39.0425.51628 - +39.0425.590587  
Fax +39.0425.590156  
[www.ruthinium.it](http://www.ruthinium.it) [info@ruthinium.it](mailto:info@ruthinium.it)